

Micro ocular ME 100

microscopía en el ordenador (micro ocular con conexión al ordenador)

Con el micro ocular es posible conectar su microscopio por USB al ordenador y documentar su investigación o hacer visible la muestra a un público mayor (enseñanza escolar, reuniones, etc). El micro ocular se sitúa encima del ocular del microscopio y le ofrece una resolución de 1280 x 1024 píxeles. El micro ocular le ofrece la posibilidad de transformar de forma económica su microscopio en un video microscopio. Desde nuestro punto de vista, este micro ocular es uno de los desarrollos más innovadores en el sector de la microscopía. Gracias al anillo adaptador puede utilizar el micro ocular con cualquier microscopio que tengan oculares con un diámetro de 23 o 30 mm. El software que acompaña al micro ocular le permite registrar, archivar y editar las imágenes de forma confortable en su ordenador.

- Instalación sencilla y rápida.
- Colocar el micro ocular y conectarlo al puerto USB de su PC.
- Puede ser usado con todos los microscopios que tengan oculares con un diámetro de 23 mm o 30 mm.
- Posibilidad de captar imágenes o secuencias de video.
- Resolución de 1280 x 1024 píxeles.
- Se incluye en el envío el software.



Aquí ve la parte frontal del micro ocular ME 100



Aquí ve la parte posterior del micro ocular ME 100




Especificaciones técnicas

Conexión a PC	Puerto USB
Aumento	por 10
Resolución	1280 x 1024 píxeles
Adaptación al micro ocular	23 mm / 30 mm
Requisitos del sistema	para Windows 98, 2000, ME, XP



Aquí ve el micro ocular analizando una varilla de ajuste de una balanza.

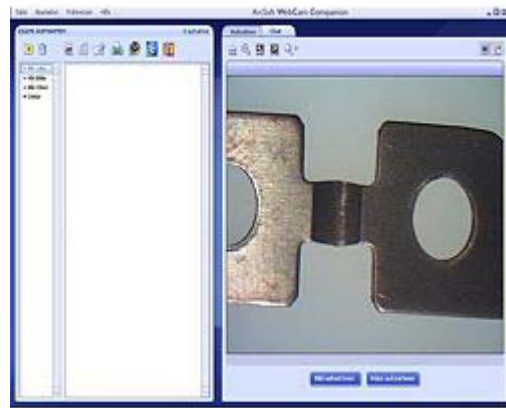

Aquí ve una parte del paquete de software que se incluye en el envío.

Contenido del envío

1 x micro ocular MM 100, 1 x cable interfaz USB, 1 x paquete software e instrucciones de uso



C/ IKEA, 51 - LOCAL B - 48940 LEIOA - VIZCAYA

TFNO.: 944803040 - FAX: 944348191

Email: isotest@isotest.es

<http://www.isotest.es>